

## AUTOHALER®

---

### 1 TECHNIEK

- 1 Neem een rechthoudende houding aan.
- 2 Neem de dop van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te trekken.
- 3 Schud de Autohaler® krachtig gedurende enkele seconden.
- 4 Houd de Autohaler® rechtop. Duw de hefboom bovenaan het toestel naar boven. De Autohaler® is nu geladen.
- 5 Blijf de Autohaler® rechtop houden en zorg dat uw hand de inhaalopening aan de onderzijde niet afsluit.
- 6 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 7 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 8 Buig het hoofd licht achterover.
- 9 Adem langzaam en diep in, zodat u een “klik” hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna verder inademen.
- 10 Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- 11 Adem rustig uit door de mond.
- 12 Breng de hefboom terug naar beneden.
- 13 Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 12.
- 14 Plaats de dop terug op het mondstuk.
- 15 Spoel de mond met water (niet inslikken).



## 2 AANBEVELINGEN

- Bewaar de Autohaler® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Autohaler®.
- De Autohaler® is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt bij het verstuiven in de lucht of tegen een spiegel.

## 3 EERSTE GEBRUIK/REINIGING

Als dit een nieuw apparaat is of als het gedurende twee weken of meer niet gebruikt werd, moet u het voor gebruik eerst klaarmaken door twee dosissen op de volgende wijze in de lucht te verstuiven.

- 1 Neem de dop van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te trekken.




- 2 Houd de Autohaler® rechtop. Duw de hefboom bovenaan het toestel naar boven.



- 3 Richt de opening van het mondstuk van u weg, zodat het vrijgekomen geneesmiddel in de lucht wordt verstoven.

Om een eerste dosis vrij te maken, duw het schuifje onderaan het toestel in de richting van de pijl.

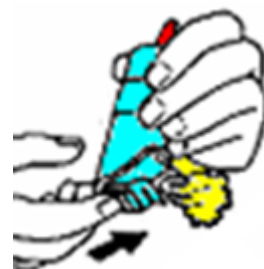

- 4 Duw de hefboom terug naar beneden.

- 5 Herhaal de stappen 2 en 3 om een tweede dosis vrij te maken. Nadat een tweede dosis is vrijgekomen duwt u de hefboom opnieuw naar beneden. De Autohaler® is nu klaar voor gebruik.

