


VERNEVELAAR

1 TECHNIEK

- 1 Zet het toestel gedurende enkele seconden aan terwijl het leeg is, zodat resterend vocht verwijderd wordt.
- 2 Druppel de medicatie in het aërosolpotje.
- 3 Voeg zo nodig fysiologisch serum toe zodat een startvolume van ± 3 tot 4 ml bekomen wordt. (20 druppels = 1 ml).
- 4 Zet het toestel aan.
- 5 Neem een rechtzittende houding aan.
- 6 Steek het pijpje in de mond en omsluit het goed met de lippen (of plaats het masker over de neus en de mond).
- 7 Buig het hoofd licht achterover.
- 8 Adem traag in door de mond. Hou de adem ± 5 seconden in en adem rustig uit. Vernevel op deze manier verder tot één minuut nadat de vernevelaar begint te sputteren.
- 9 Zet het toestel af.
- 10 Spoel de mond met water (niet inslikken).
- 11 Spoel het aërosolpotje af onder heet water en laat het drogen op een propere doek.

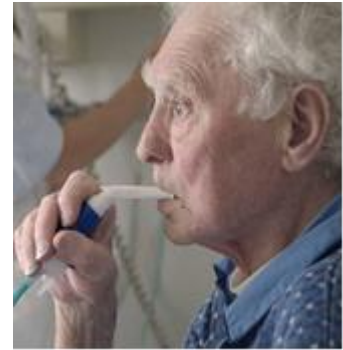

2 AANBEVELINGEN

- Gebruik geen zuurstof voor verneveling.
- Gebruik bij voorkeur monodosis.
- Gebruik bij voorkeur een pijpje.
- Vul het aërosolpotje vlak voor de start van de verneveling.
- De verneveltijd mag maximum 10 minuten bedragen.

3 ONDERHOUD

3.1 Dagelijks: reinigen

- 1 Reinig het pijpje of masker en het aërosolpotje met water en detergent.
- 2 Spoel de onderdelen af onder heet stromend water.
- 3 Laat de onderdelen drogen op een propere doek. Bewaar alles op een droge en stofvrije plaats.



3.2 Wekelijks: ontsmetten

- 1 Reinig het pijpje of masker en het aërosolpotje met water en detergent.
- 2 Ontsmet de onderdelen door:
koken in water gedurende 5 minuten.
OF
vaatwasser: minstens 70° gedurende 30 minuten.
! Lees na in de gebruiksaanwijzing of vraag aan de fabrikant of de onderdelen bestand zijn tegen koken of de vaatwasser.
- 3 Laat de onderdelen drogen op een propere doek. Bewaar alles op een droge en stofvrije plaats.

4 AANBEVELINGEN

- Vervang het pijpje of masker en het aërosolpotje om de drie maanden. Vervang de filter binnen de tijdspanne aangegeven door de fabrikant.
- Laat het toestel jaarlijks nakijken door de fabrikant of de apotheker.