




NOVOLIZER®

1 TECHNIEK

- 1 Neem een rechtzittende houding aan.
- 2 Neem de dop van het mondstuk door aan weerszijden op de geribbelde delen te duwen.
- 3 Houd de Novolizer® horizontaal. Druk de rode drukknop volledig in: u hoort een klik en de kleur van het controlevenster verandert van rood naar groen. De Novolizer® is nu klaar voor gebruik.
- 4 Blijf de Novolizer® horizontaal houden.
- 5 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 6 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 7 Buig het hoofd licht achterover.
- 8 Adem snel en diep in, zodat u een "klik" hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna verder inademen. Bij correcte inhalatie verandert de kleur van het controlevenster van groen naar rood.
- 9 Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- 10 Adem rustig uit door de mond.
- 11 Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 10.
- 12 Plaats de dop terug op het mondstuk.
- 13 Spoel de mond met water (niet inslikken).

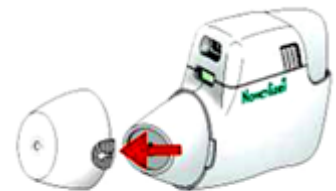

2 AANBEVELINGEN

- Bewaar de Novolizer® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Novolizer®.
- De Novolizer® is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
- Vervang de Novolizer® als het patroon leeg is.

3 EERSTE GEBRUIK

Als dit een **nieuw** apparaat is moet u het voor gebruik eerst klaarmaken door het patroon in de Novolizer® te plaatsen.

- 1 Neem de Novolizer® uit de plastic verpakking.
- 2 Houd het toestel horizontaal.
- 3 Bovenaan de Novolizer® bevindt zich een klepje. Duw op de geribbelde delen, schuif het klepje naar voor en til het op.
- 4 Verwijder de beschermfolie van het potje met de vulling.



- 5 Neem de vulling uit het potje en plaats het in de inhalator (met de dosisteller naar het mondstuk gericht).



- 6 Plaats het klepje terug op de Novolizer® en klik het vast (door het naar achter te schuiven).



4 AANDACHTSPUNTEN

- Door de houdbaarheid mag het potje met de vulling pas vlak voor gebruik geopend worden
- Het patroon mag maximum 6 maanden na openen gebruikt worden.